

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ С ЦЕЛЬЮ
ЭКСПЕРТНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОГРАММЫ
«Песочная терапия»**

Содержание

1. Минимальные системные требования «Песочная терапия».....3
2. Порядок установки программы «Песочная терапия».....3

1. МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Процессор с тактовой частотой 2.0 ГГц;
- оперативная память от 1 Гб (для WindowsXP/SP3), от 2 Гб (для (Vista/ 7 / 8.1/10));
- мышь;
- веб камера\микрофон (входит в комплект);
- минимум 500 Мбайт свободного места на диске (требования к размеру дискового пространства зависят от интенсивности использования программы);
- операционная система: WindowsXP / Vista/ 7 / 8.1/10;
- дисковод DVD.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ

- Вставьте диск с программой в дисковод. Через несколько секунд появится окно автозапуска, изображенное на рисунке 1. Если окно автозапуска не появилось, необходимо в проводнике Windows перейти к содержимому диска с программой и запустить установку программы вручную, дважды кликнув левой кнопкой мыши на значке файла с именем setup.exe (или setup, если расширения файлов скрыты настройками системы).

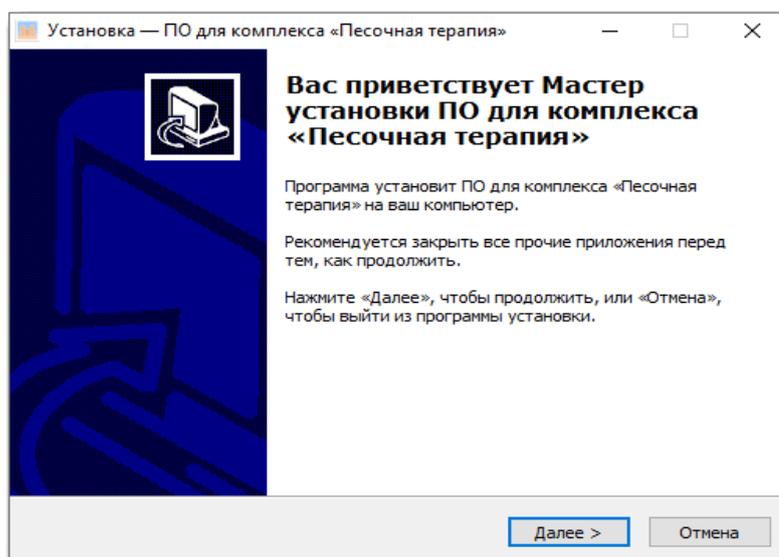


Рисунок 1

! Для установки программы пользователь должен обладать правами администратора.

Нажмите на кнопку **Далее**, чтобы перейти к следующему экрану установки, изображенному на рисунке 2.

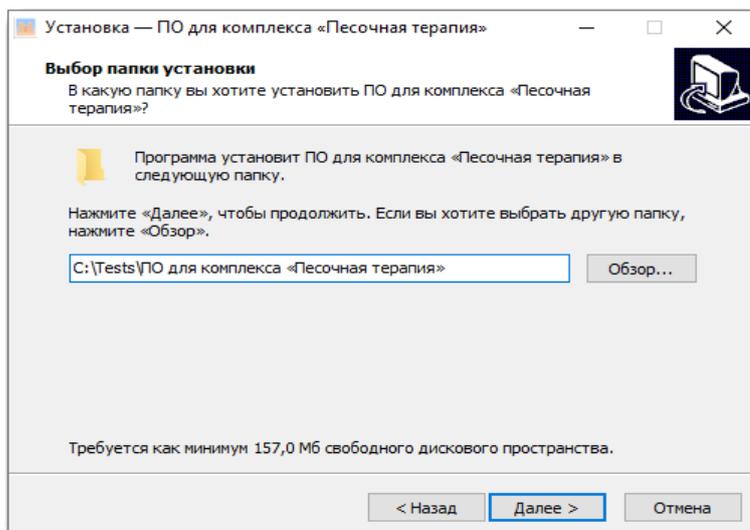


Рисунок 2

На данном экране Вы можете указать папку для установки программы. Не рекомендуется менять папку для установки, предложенную по умолчанию. Нажмите на кнопку **Далее**, чтобы перейти к следующему экрану установки, изображенному на рисунке 3

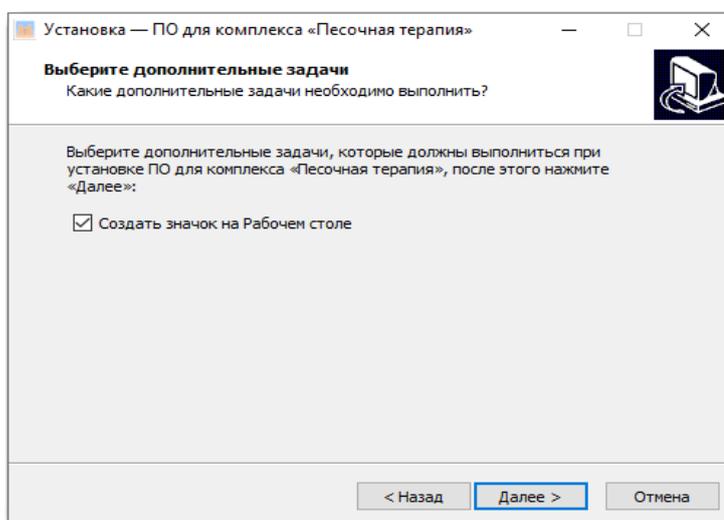


Рисунок 3

- На этом экране Вы можете снять галочку, если не нужно создавать значок на Рабочем столе. Нажмите кнопку **Далее**, чтобы перейти к следующему экрану установки, изображенному на рисунке 4.

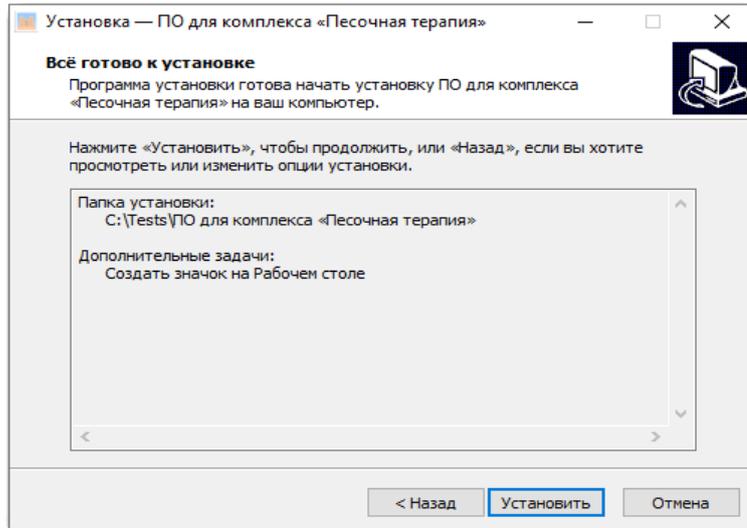


Рисунок 4

- После того как проверены все опции установки, нажмите на кнопку **Установить**, чтобы начать установку. Установка занимает около минуты (зависит от производительности компьютера и скорости дисководов).

! Внимание! Установленные на компьютере антивирусные программы могут выводить различные предупреждающие сообщения в ходе установки программы. Во всех предупреждающих сообщениях следует разрешить программе выполнять все требуемые ей действия.

- После установки программы нажмите кнопку **Завершить**, чтобы закрыть окно установки. Если установлена галочка Запустить программу, то после закрытия окна, программа будет запущена автоматически. Так же программу можно запустить с Рабочего стола или из меню Пуск/Все программы...

! Установленная программа работает только при наличии оригинального диска с программой в дисковом диске!

- Перед запуском программы установите штатив с камерой над подносом с песком и подключите камеру в разъем USB компьютера.